

breo®


breo 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 사용하기 전에 설명서를 잘 읽어 주시고, 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관해 주십시오.

목 차

제품소개 및 구성	1
제품기능구성	2
사용법	3
제품사양	5
문제해결	6
유지보수	7
제품교환/환불 안내	8
주의사항	9
제품보증서	11
제품보증안내	13

simply relax

제품기능구성

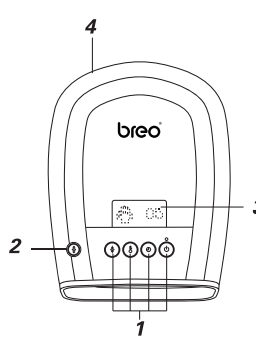

1. 조작버튼
공기압 조절 / 온열 조절 / 시간 조절 / 스위치
2. 공기압 감소밸브
3. LCD 디스플레이
4. 전원단자

2

사용법

전원 켜기/끄기

1. 전원 버튼 (●)을 누르면 Relaxer가 작동합니다.
공기압 기본 설정 : Soft 모드
2. 전원 버튼 (●)을 다시 한번 누르면 Relaxer가 작동을 멈춥니다.

작동법

- 시간 : ● 버튼을 누릅니다.
5분 / 10분 / 15분으로 선택이 가능합니다.
- 온열 효과 : ● 버튼을 누릅니다. 저온(L)과 고온(H)으로 선택 가능합니다.
고온에서 ● 버튼을 한번 더 누르면 온열 기능이 끝납니다.
- 공기압 조절 : ● 버튼을 누릅니다. 세가지 모드로 조절 가능합니다.
(표준 모드, Soft 모드, Hard 모드)

주의 사항 : 공기압 입력이 너무 강하면, 공기압 감소 밸브를 가볍게 누르세요.

4

문제해결

문제해결

만약 제품을 사용하면서 문제가 있다면 아래에 있는 방법을 체크해 주십시오. 아래의 방법으로도 동작하지 않는다면 전원을 끄고 서비스 센터에 알려주십시오. 절대 스스로 분해하거나 수리하지 마십시오.

문제점	예상원인	해결방법
전원이 안 켜질때	건전지 잔량 부족 혹은 방전	건전지를 교체해 주십시오.
	건전지 (+)극과 (-)극 위치 올바르게 확인 필요	건전지 (+)극과 (-)극 위치를 확인 후 올바르게 위치하십시오.
	어댑터 연결상태 불량	어댑터가 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.
공기압, 온열이 약해졌을 때	건전지 잔량 부족 혹은 방전	건전지를 교체해 주십시오.

6

제품교환/환불 안내

제품교환/환불 안내

1. 구매일로부터 10일 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자로 중요한 수리가 필요한 경우 구매 영수증을 이용해 제품 교환 또는 환불을 받을 수 있습니다.
2. 만일 구입일로부터 1개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자로 중요한 수리가 필요하다면 상품 교환이나 수리를 할 수 있습니다.

단, 제품 사용 결함 외에 기타 요인으로 인해 상품이 손상되지 않았어야 하며, 사용자 설명서 및 기타 부속부품과 함께 최초 구입 시에 포장된 상태와 동일한 경우에만 상품 교환이나 환불, 수리를 받을 수 있습니다.
※ 상품의 내용을 확인하기 위하여 보장을 개봉한 경우에는 교환/반품/수리가 불가능합니다

위의 사항을 처리하고자 하시거나 문의사항이 있으실 경우에는 구매처 혹은 고객센터(1588-2336)로 연락해 주시면 신속하게 처리해 드리겠습니다.

8

주의사항 (2)

12. 인공심장 박동기나 각종 전자 신체 보조기구 장착자와 임신부는 본 제품을 사용하지 마십시오.
13. 본 제품을 사용하려는 부위에 발진, 염증 등의 이상이 있거나 해당 부위에 수술을 받은 적이 있는 경우, 치료 중인 경우에는 본 제품을 사용하지 마십시오.
14. 본 제품은 의료 전문가의 진단과 치료를 대체하지 않습니다. 제품 사용 전 제품을 사용해도 문제가 없을 지 확인이 필요하다면 꼭 담당 의사와의 의의하십시오.
15. 사용 중 제품에 이상이 있거나 불쾌감이 느껴질 시 사용 중단을 하고, 전원을 차단한 후 점검해 주십시오.
16. 장시간 사용하지 않을 경우 건전지 용액이 새어 나와 제품이 손상되는 것을 피하기 위해 건전지를 분리해 주십시오.
17. 본 제품은 가정용 제품으로 개발되었으므로, 다른 상업적인 용도나 치료, 진단을 위해 사용하지 마십시오.
18. 제품 청소 시 살균 소독된 손을 증정 세제에 묻혀 닦아냅니다. 제품을 절대 물로 씻지 마십시오.

10

보증서 안내

보증서를 이용하면 제품 유지보수 관련 서비스를 쉽게 제공 받으실 수 있습니다. 보증서 카드는 각 제품에 1개씩만 포함되어 있으며, 이를 분실하였을 때는 재발급이 어려우니 분실되지 않도록 보관에 유의하시기 바랍니다.
※ 품질보증 기간은 구매일로부터 1년입니다.

보증조건

1. 구매일로부터 1년간 제품보증서로 수리 서비스를 받으실 수 있습니다. 제품이 있는 일련 번호가 명확히 알아볼 수 없게 되거나 일련 번호와 보증서에 등록된 정보가 상이하면 적절한 서비스 제공이 힘들 수 있습니다. 일련번호는 배터리 제거 후 내부 확인 가능. (배터리는 보증에 포함되지 않습니다.)
 2. 잘못된 전압 사용, 우발적 사고 등 사용자 부주의와 지정되지 않은 본 제품의 수리를 맡겨 이상이 발생할 경우 보증이 불가합니다.
 3. 정해진 품질보증 서비스 이외의 부가적인 서비스나 운송 서비스에 대해서는 비용이 발생할 수 있습니다.
 4. 사용자의 과실이나 부주의한 보관 등으로 발생한 문제, 비전문가의 제품 해체로 인한 문제, 불충분한 보호 고정에 대해서는 품질보증 서비스를 제공하지 않습니다.
 5. 보증서 또는 영수증을 분실한 경우 해당 물품의 수입통관일부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증 기간을 계산합니다.
 6. 품질보증 서비스 신청 시 제품보증서를 동봉해 주십시오. 저희 회사는 중고제품의 상품회수, 폐기된 제품에 대한 수거, 처리 및 재활용을 책임지고 있습니다.
 7. 가정용외의 용도로(영업용 및 공중시설등) 사용 시에는 보증이 불가합니다.
 8. 태풍, 지진, 수해 등 자연재해로 인한 고장 시에는 보증이 불가합니다.
- ※ 주의 : 서비스가 지속적으로 업그레이드 되기 때문에 세부 규정은 별도의 공지 없이 수정될 수 있음을 양해바랍니다.

12


제품소개 및 구성

제품소개

iPalm520 Relaxer는 손바닥의 특정 지점을 온열로 지안하고 마사지함으로써, 긴장과 스트레스, 피로를 풀어주며 혈액순환을 활성화하여 내부 장기의 기능을 원활하게 하고 인체를 건강한 상태로 유지하도록 도와줍니다

제품구성

iPalm520 Relaxer, 어댑터, 사용자 설명서, 건전지(AA size 4개입)

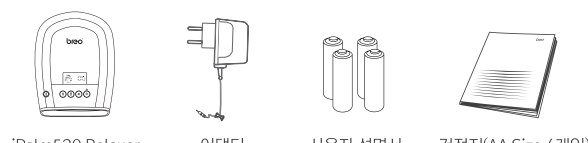

1

사용법

사용 전 준비사항

1. 제품 구성품이 빠짐없이 있는지 확인해 주십시오.
2. 어댑터가 손상되지 않았는지 확인해 주십시오.

건전지 장착 방법

1. 본체 뒷면의 건전지 커버를 열고, AA 건전지 4개를 넣어 주십시오.
 2. 건전지 커버를 닫아 주십시오.
- ※ 건전지의 (+) 극과 (-) 극이 올바르게 되어 있는지 확인하십시오.

사용방법

1. 손가락을 착용합니다. (선택 사항)
2. 손바닥이 아래를 향하게 손을 꼭 피고 Relaxer 안에 넣습니다.
3. 전원을 켜고 조작버튼을 눌러 알맞은 마사지를 시작합니다.

3

제품사양

제품사양

전압	DC 6V
소비전력	6W
건전지 종류	AA 건전지
제품소재	PC수지, ABS수지
제품크기	iPalm520 : (L)265mm x (W)201mm x (H)90mm
무게	1128g
사용환경	온도 : 5℃ ~ 40℃ ; 습도 : ≤80% 기압 : 860hpa ~ 1060hpa

5

유지보수

유지보수

습기, 설치류 그리고 오염을 방지할 수 있도록 하십시오. 제품을 청소하기 전에는 제품의 전원을 종료해 주십시오. 제품 사용 후 안전한 곳에 보관하십시오. 무거운 물건을 제품 위에 올려두지 마십시오.

결합이 있을 시 전문 기술자에게 문의하십시오. 스스로 절대 분해하지 마십시오.

보관 시 주의사항

보관 기간이 3개월을 초과할 경우 제품 작동여부를 확인하고, 전원을 30분 정도 켜두시기 바랍니다. 바닥, 벽이나 지평 부근에 보관하지 마십시오. 좋은 환기 상태를 유지해 주시고 직사광선과 부식성 가스를 피해 주시길 바랍니다.

운반 시 주의사항

이 제품은 간단한 내진성 디자인을 가지고 있어서 비행기, 기차, 차, 배로 운반이 가능합니다. 다만 눈, 비, 습도를 피해 주시고 항상 똑바른 방향으로 놓아 주십시오.

전원공급장치 확인

전원공급장치를 확인하고 전압이 제품의 정격 범위를 초과하는 경우 제품을 켜지 마십시오. 전원공급장치의 케이블을 주기적으로 체크하십시오. 만약 훼손이 되었다면 제품을 사용하지 마시고, 서비스 센터로 보내 주십시오.

7

주의사항 (1)

사용자 주의사항을 유심히 읽고 안전하게 올바른 방법으로 제품을 사용하십시오.

1. 사용자 설명서의 내용을 자세히 읽은 후 안내되어 있는대로 사용하십시오.
2. 본 제품을 사용할 때는 반지 등의 장신구 착용을 금지합니다.
3. 본 제품을 사용하기 1시간 전에는 매니큐어를 하지 않습니다.
4. 공기 주머니가 과한 압력으로 손상되지 않도록 반드시 제품에 손을 먼저 놓은 후 전원을 켜 주십시오. (장갑 착용 후 제품 사용을 권장)
5. 개인에 따라 손이 약하고 민감하신 분들은 통증을 느낄 수 있습니다.
6. 기기를 사용한 직후 피부에 자극이 남는 것은 자연스런 현상이며, 이러한 자극은 통상적으로 15분 이내에 사라집니다.
7. 음주 후이거나 몸 상태가 좋지 않을 때, 운전 중에는 제품을 사용하지 마십시오.
8. 습한 곳, 온도가 높은 곳, 부식성 가스가 있는 곳에서 사용 및 보관하지 마십시오.
9. 본 제품을 전기 온열기구, 조리기구 근처에 두거나 직사광선에 두지 마십시오.
10. 뇌졸중이나 혈관질환, 저포도당증이 있으신 분은 본 제품을 사용하지 마십시오.
11. 7세 이하 어린이와 거동이 불편한 환자 또는 신체적/정신적으로 장애가 있으신 분은 본 제품을 사용하지 않습니다.

9

제품 보증서 보증기간
1년

제 품 명 : iPalm520 Relaxer 일련번호 : _____

구 입 일 자 : _____ 구매지점 : _____

고 객 성 명 : _____

연 락 처 : _____

주 소 : _____

제품교환/환불 관련 안내

1. 구매일로부터 10일 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자로 중요한 수리가 필요하다면 보증서나 구매영수증을 이용해 제품교환 또는 환불을 받을 수 있습니다.

2. 만일 구입일로부터 1개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자로 중요한 수리가 필요하다면 상품 교환이나 수리를 할 수 있습니다. 단, 제품 사용 결함 외에 기타 요인으로 인해 상품이 손상되지 않았어야 하며, 사용자 설명서 및 기타 부속부품과 함께 최초 구입 시에 포장된 상태와 동일한 경우에만 상품 교환이나 환불, 수리를 받을 수 있습니다.
※ 상품의 내용을 확인하기 위하여 보장을 개봉한 경우에는 교환/반품/수리가 불가능합니다.

위의 사항을 처리하고자 하시거나 문의사항이 있으실 경우에는 구매처 혹은 고객센터(1588-2336)로 연락해 주시면 신속하게 처리해 드리겠습니다.
배터리는 보증에 포함되지 않습니다.

11

제품보증안내

보증서 안내

보증서를 이용하면 제품 유지보수 관련 서비스를 쉽게 제공 받으실 수 있습니다. 보증서 카드는 각 제품에 1개씩만 포함되어 있으며, 이를 분실하였을 때는 재발급이 어려우니 분실되지 않도록 보관에 유의하시기 바랍니다.
※ 품질보증 기간은 구매일로부터 1년입니다.

보증조건

1. 구매일로부터 1년간 제품보증서로 수리 서비스를 받으실 수 있습니다. 제품이 있는 일련 번호가 명확히 알아볼 수 없게 되거나 일련 번호와 보증서에 등록된 정보가 상이하면 적절한 서비스 제공이 힘들 수 있습니다. 일련번호는 배터리 제거 후 내부 확인 가능. (배터리는 보증에 포함되지 않습니다.)
 2. 잘못된 전압 사용, 우발적 사고 등 사용자 부주의와 지정되지 않은 수리업체에 본 제품의 수리를 맡겨 이상이 발생할 경우 보증이 불가합니다.
 3. 정해진 품질보증 서비스 이외의 부가적인 서비스나 운송 서비스에 대해서는 비용이 발생할 수 있습니다.
 4. 사용자의 과실이나 부주의한 보관 등으로 발생한 문제, 비전문가의 제품 해체로 인한 문제, 불충분한 보호 고정에 대해서는 품질보증 서비스를 제공하지 않습니다.
 5. 보증서 또는 영수증을 분실한 경우 해당 물품의 수입통관일부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증 기간을 계산합니다.
 6. 품질보증 서비스 신청 시 제품보증서를 동봉해 주십시오. 저희 회사는 중고제품의 상품회수, 폐기된 제품에 대한 수거, 처리 및 재활용을 책임지고 있습니다.
 7. 가정용외의 용도로(영업용 및 공중시설등) 사용 시에는 보증이 불가합니다.
 8. 태풍, 지진, 수해 등 자연재해로 인한 고장 시에는 보증이 불가합니다.
- ※ 주의 : 서비스가 지속적으로 업그레이드 되기 때문에 세부 규정은 별도의 공지 없이 수정될 수 있음을 양해바랍니다.

13