

# iDream3

User Manual

breo®

**breo** 제품을 구매해주셔서 감사합니다.  
제품 사용 전, 본 설명서를 꼼꼼하게 읽어보신 후  
편리하게 사용하세요.

## 목차

---

제품소개 및 구성

제품기능 구성

사용법

제품사양 및 문제해결

유지보수

주의사항

제품교환 · 환불 안내

제품 보증 안내

제품 보증서

## 제품소개 및 구성

---

### 제품 소개

iDream3는 공기지압, 진동과 온열 기능을 통해 지치고 피로한 머리와 눈을 풀어줍니다. 무선 리모컨으로 원격 조종이 가능하며, 음악기능이 내장되어 있어 제품을 사용하는 동안 음악을 들으실 수 있습니다. 또한 앞이 보이게 설계되어 편리하게 사용이 가능합니다.

### 제품구성

iDream3, 무선 리모컨, 충전 어댑터, 이어폰, 건전지, 사용자 설명서



iDream3



무선 리모컨



이어폰



건전지




사용자 설명서



충전 어댑터

## 제품기능 구성

### 제품 기능 및 구성

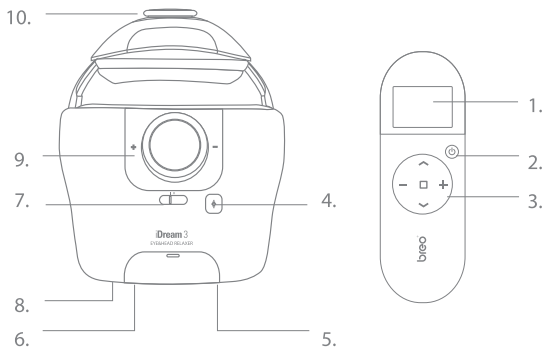

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. LCD 표시창     | 6. 이어폰 잭       |
| 2. ON / OFF 버튼 | 7. 본체 전원 스위치   |
| 3. 조작 버튼       | 8. 인코딩 키       |
| 4. 압력 감소 밸브    | 9. 머리둘레 조절 손잡이 |
| 5. 충전단자        | 10. 조임 조절 손잡이  |

**LCD 화면 구성:** 시간 / 공기압력 / 진동 / 온열 / 음악 (위에서 아래 순서로)

**조작 버튼:**  $\wedge$  /  $\vee$  (기능선택) /  $+$  /  $-$  (각기능의 모드 선택)

$\square$  (확인 버튼 / 기능 시작 및 종료)

**본체 전원 스위치:** 왼쪽 또는 오른쪽으로 밀어 ON / OFF 설정이 가능합니다.

"|"은 ON 상태이며, "O"는 OFF 상태입니다.



**※ 사용을 완료한 후에는 본체 전원 스위치를 반드시 "O"에 놓아 주십시오.**

# 사용법

---

## 주의사항

iDream3 Relaxer와 리모컨 연결 중 문제가 생길 경우 아래에 있는 방법을 체크해 주십시오.

1. 리모컨을 끄고 본체 전원 스위치를 "○"에 놓습니다. 제품의 인코딩 키 (제품 기능 구성도 8번)를 누릅니다. 인코딩 키를 누르면서 본체 전원 스위치를 " | "에 위치시키면 제품 전면의 파란색 LED가 깜빡입니다.
2. 인코딩 키를 놓는 동시에 2~3초간 리모컨의 와  버튼을 누릅니다. 리모컨 LCD 표시창 켜지고 제품 전면의 파란색 LED가 깜빡임을 멈추면 인코딩이 성공적으로 수행된 것입니다. (이 단계는 6초안에 수행되어야 합니다.) 만약 성공적으로 수행되지 않았다면 똑같은 방법으로 다시 수행해야 합니다.
3. 인코딩이 성공적으로 수행 되었다면 본체 전원 스위치를 "○"에 두었다가 다시 " | "로 놓은 후 리모컨을 사용하시면 정상적으로 작동 할 것입니다.

※ Relaxer는 1개의 리모컨만 지원합니다. 여러 개의 리모컨은 적용되지 않습니다.

## 사용 전 준비사항

사용 전 제품을 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 충전 어댑터에 손상이 있는지 확인합니다.
2. 배터리가 충분히 충전되었는지 확인합니다.
3. 제품과 함께 제공되는 안정화된 충전 어댑터로 배터리를 충전해주시기 바랍니다.

## 착용

1. 제품 뒷면에 있는 머리둘레 조절 손잡이를 이용하여 착용하기 편안하게 조절합니다.
2. 제품 상단에 있는 조임 조절 손잡이를 이용하여 착용하기 편안하게 조절합니다.
3. 제품을 착용하고 전원을 켜 제품 사용을 시작해 주십시오. 또한 제품 착용 후 걷거나 운전을 하지 마십시오.

# 사용법

---

## 충전

1. iDream3 Relaxer의 충전단자 덮개를 엽니다.
2. 충전어댑터의 DC 플러그를 제품의 충전단자에 꽂아주십시오.

## 주의사항

1. 충전하는 동안 본체 전원 스위치를 "O"에 두고 충전하십시오. 충전 시간은 약 3~4시간입니다.
2. 제품이 충전 되고 있는 동안은 제품의 손상을 방지하기 위해 제품의 작동이 자동으로 중지 됩니다.
3. 배터리의 전력이 약하면 제품은 자동으로 꺼집니다. Relaxer 전면의 LED가 깜빡 거리면 배터리가 약하다는 것을 의미합니다. 이때는 사용을 중지하고 충전하시기 바랍니다.

# 사용법

---

## 자동 모드(리모컨 없이 사용)

### 전원 켜기/끄기

1. 전원 켜기: iDream3 Relaxer 뒷면에 본체 전원 스위치를 "I"에 놓습니다.  
자동모드는 리모컨이 필요 하지 않으며, 8초 뒤에 제품이 작동을 시작합니다.

※ 기본 설정: 공기 압력 + 온열 + 음악 + 15분 작동

2. 전원 끄기: 작동 시작 후 15분 뒤에 자동으로 전원이 꺼집니다. 작동 완료 후 본체 전원 스위치를 "O"에 놓습니다.

## 수동 모드(리모컨 사용)

### 전원 켜기/끄기

1. 전원 켜기: iDream3 Relaxer 뒷면에 본체 전원 스위치를 "I"에 놓습니다.
2. 리모컨 ON /OFF 버튼을 누르십시오.  
기본 설정: 공기 압력 + 온열 + 음악 + 15분 작동  
기본 공기 압력: 모드5 (모드 1~4까지 순환)  
기본 온열: 저온모드  
기본 음악: 웰빙 음악 모드
3. 전원 끄기: 리모컨 ON /OFF 버튼을 누르십시오.
4. 사용 완료 후 본체 전원 스위치를 "O"에 놓습니다.

수동 모드는 공기 압력, 온열, 진동, 음악 기능 선택, 모드선택 및 작동 시간을 자유롭게 설정할 수 있습니다.



## 제품사양 및 문제해결

### 제품사양

정격 전압	DC 4.5V
소 비 전 력	4.5W
제품크기/무게	(W)1206mm X (L)282mm X (H)254mm / 1125g
사 용 환 경	온도 : 5℃ ~ 40℃ / 습도 : ≤80% 기압 : 860hpa ~ 1060hpa

### 문제해결

제품 사용 시 문제가 생길 경우 상황에 맞는 아래 해결 방법을 시도해 보십시오. 아래 방법으로도 작동하지 않을 경우 서비스 센터에 맡겨 주십시오. 비전문가가 개인적으로 제품을 분해 또는 수리를 시도하여 불량이 발생 할 경우 추후 A/S 서비스가 제한 될 수 있습니다.

문제점	예상원인	해결방법
전원이 안 켜질 때	충전량 부족 혹은 방전	배터리를 충전해 주십시오.
	iDream3 배터리 충전량 부족	만약 부족하다면 배터리를 충전해주십시오.
	무선 리모컨 배터리 부족	새 건전지로 교체해주십시오.
	무선 리모컨 배터리 배치 오류	+/- 극이 잘 맞춰졌는지 확인해주시고 배터리가 정확히 잘 끼워져 있는지 확인해주십시오.
공기압 혹은 진동이 약해졌을 때	배터리 충전량 부족	배터리를 충전해 주십시오.

## 유지보수

---

### 보관 시 주의사항

제품이 습기, 오염에 노출되지 않도록 안전한 곳에 보관하십시오. 보관 기간이 6개월을 초과할 경우 제품 작동여부를 확인하고 전원을 30분 정도 켜두시기 바랍니다. 직사광선과 부식성 가스를 피해주시기 바랍니다.

### 운반 시 주의사항

이 제품은 내진성을 고려한 디자인으로 비행기, 기차, 차, 배로 운반이 가능합니다. 가급적 눈, 비, 충격을 피해주시고 정방향으로 놓아 주십시오.

### 고장수리

사용 조작 시 고장이 발생하면 본체 배터리량을 먼저 확인해주시고 고장이 해결되지 않으면 전원을 끄고 본사 A/S 서비스 센터로 보내주십시오. 또한 자체 분해나 수리는 하지 마십시오. 전압이 제품의 정격 범위를 초과하는 경우 제품을 켜지 마십시오. 전원공급장치의 케이블을 주기적으로 체크하십시오.

## 주의사항

---

### ※ 사용자 주의사항을 숙지하고 안전하고 올바른 방법으로 제품을 사용하십시오.

1. 사용자 설명서의 내용을 자세히 읽은 후 안내되어 있는대로 사용하십시오.
2. 음주 후이거나 몸 상태가 좋지 않을 때, 운전 중에는 제품을 사용하지 마십시오.
3. 습한 곳, 온도가 높은 곳, 부식성 가스가 있는 곳에서 사용 및 보관, 충전하지 마십시오.
4. 본 제품을 전기 온열기구, 조리기구 근처에 두거나 직사광선에 두지 마십시오.
5. 뇌졸중, 혈압질환, 저포도당증이 있거나 녹내장, 백내장, 망막 분리 등 안구 질병 뇌질환이 있으신 분은 사용하지 마십시오.
6. 7세 이하 어린이와 거동이 불편한 환자 또는 신체적 / 정신적으로 장애가 있으신 분은 본 제품을 사용할 수 없습니다.
7. 인공심장 박동기나 각종 전자 신체 보조기구 장착자와 임산부는 본 제품을 사용하지 마십시오.
8. 제품 사용시 콘택트렌즈나 안경을 빼고 사용하십시오.
9. 시력 교정술(라식, 라섹 및 렌즈삽입술 등)을 받으신 분은 사용하지 않는 것을 권장합니다. 사용을 원하실 경우 반드시 담당의사와 상담 후 사용 하십시오.
10. 본 제품은 의료 전문가의 진단과 치료를 대체하지 않습니다. 제품을 사용하기 전 제품을 사용해도 문제가 없을지 확인이 필요하다면 꼭 전문의와 논의하여 사용해 주십시오.
11. 본 제품을 사용하려는 부위에 발진, 염증 등의 이상이 있거나 해당 부위에 수술을 받은 적이 있는 경우, 치료중인 경우에는 본 제품을 사용하지 마십시오.
12. 본 제품의 온열 기능은 탈모, 아토피, 여드름, 알레르기 악화와 관계 없습니다
13. 사용 중 제품에 이상이 있거나 불쾌감이 느껴지실 경우 사용을 중단하시고 전원을 차단한 후 점검 해주세요.
14. 충전 어댑터는 제품과 함께 제공되는 안정화된 어댑터로만 사용해주시고 전기안전에 유의해주세요
15. 제품을 착용하고 전원을 켜 제품 사용을 시작해주세요. 또한 제품 착용 후 눕거나 벽에 기대거나 걷지 마십시오.
16. 본 제품은 가정용 제품으로 개발되었으므로 다른 상업적인 용도나 치료, 진단을 위해 사용하지 마십시오.
17. 제품 청소 시 살균 소독된 솜을 중성세제에 묻혀 닦아 냅니다. 제품을 절대 물로 씻지 않습니다.
18. 보관 전이나 사용 완료 후에는 제품이 손상되는 것을 방지하기 위해 반드시 본체 전원 스위치를 "O"에 놓아주세요.

## 제품교환·환불 안내

---

※ 사용자 주의사항을 숙지하고 안전하고 올바른 방법으로 제품을 사용하십시오.

1. 구매일로부터 10일 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자의 경우 구매 영수증 확인 후 제품을 교환 또는 환불 받을 수 있습니다. 제품 사용 후 단순 소비자의 변심, 환불 기간이 지난 후의 환불 요청의 경우 제한을 받을 수 있으며 부적절한 사용으로 인한 고장에 대해서는 수리비가 발생할 수 있습니다.
2. 만일 구입일로부터 1개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자로 중요한 수리가 필요하다면 상품 교환이나 수리를 할 수 있습니다. 단, 제품 사용 결함 외에 기타 요인으로 인해 상품이 손상되지 않았어야 하며, 사용자 설명서 및 기타 부속부품과 함께 최초 구입시에 포장된 상태와 동일한 경우에만 상품 교환이나 환불, 수리를 받을 수 있습니다.

위의 사항을 처리 받고자 하시거나 문의사항이 있으실 경우에는 구매처 혹은 고객센터(1588-2336)로 연락해 주시면 신속하게 처리해 드리겠습니다.

# 제품 보증 안내

---

## 보증서 안내

보증서를 이용하면 제품 유지보수 관련 서비스를 쉽게 제공 받으실 수 있습니다. 보증서 카드는 각 제품에 1개씩만 포함되어 있으며, 이를 분실하였을 때는 재발급이 어려우니 분실되지 않도록 보관에 유의하시기 바랍니다.

※ 품질보증 기간은 구매일로부터 1년간입니다.

## 보증조건

1. 구매일로부터 1년간 제품보증서로 수리 서비스를 받으실 수 있습니다.  
제품에 있는 일련번호가 명확히 알아 볼 수 없게 되거나 일련번호와 보증서에 등록된 정보가 상이하면 적절한 서비스 제공이 어려울 수 있습니다.  
(배터리는 보증에 포함 되지 않습니다.)
  2. 잘못된 전압 사용, 우발적 사고 등 사용자 부주의와 지정되지 않은 업체에 본 제품의 수리를 맡겨 이상이 발생할 경우엔 보증이 불가합니다.
  3. 정해진 품질보증 서비스 이외의 부가적인 서비스나 운송 서비스에 대해서는 비용이 발생할 수 있습니다.
  4. 사용자의 과실이나 부주의한 보관 등으로 발생한 문제, 비전문가의 제품 해체로 인한 문제, 보증서가 없거나 불가항력으로 발생한 고장에 대해서는 품질보증 서비스를 제공하지 않습니다.
  5. 품질보증 서비스 신청 시 제품보증서를 동봉해주시시오. 당사는 중고제품의 상품회수, 폐기된 제품에 대한 수거, 처리 및 재활용을 책임지고 있습니다.
  6. 가정용 외의 용도로(영업용 및 공중시설 등) 사용 시에는 보증이 불가합니다.
  7. 태풍, 지진, 수해 등 자연재해로 인한 고장 시에는 보증이 불가합니다.
- ※ 주의 : 서비스가 지속적으로 업그레이드 되기 때문에 세부 규정은 별도의 공지 없이 수정될 수 있음을 양해 바랍니다.

# 제품 보증서



## 보증서 안내

제 품 명: \_\_\_\_\_

일련번호: \_\_\_\_\_

구입일자: \_\_\_\_\_

구매지점: \_\_\_\_\_

고객성명: \_\_\_\_\_

연 락 처: \_\_\_\_\_

주 소: \_\_\_\_\_



## 제품 교환·환불 관련 안내

1. 구매일로부터 10일 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자로 중요한 수리가 필요한 경우 보증서나 구매 영수증을 이용하여 제품 교환 또는 환불을 받을 수 있습니다.
2. 만일 구입일로부터 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자로 중요한 수리가 필요하다면 상품 교환이나 수리를 할 수 있습니다. 단, 제품 사용 결함 외에 기타 요인으로 인해 상품이 손상되지 않았어야 하며, 사용자 설명서 및 기타 부속품과 함께 최초 구입 시에 포장 된 상태와 동일한 경우에만 상품 교환이나 환불, 수리를 받을 수 있습니다.

위의 사항을 처리 받고자 하시거나 문의사항이 있으실 경우에는 구매처 혹은 고객센터(1588-2336)로 연락해 주시면 신속하게 처리해드리겠습니다. 배터리는 보증에 포함되지 않습니다.

# 제품 보증서

---

## 보증서 안내

보증서를 이용하면 제품 유지보수 관련 서비스를 쉽게 제공 받으실 수 있습니다. 보증서 카드는 각 제품에 1개씩만 포함되어 있으며, 이를 분실하였을 때는 재발급이 어려우니 분실되지 않도록 보관에 유의하시기 바랍니다.

※ 품질보증 기간은 구매일로부터 1년간 입니다.

## 보증조건

1. 구매일로부터 1년간 제품보증서로 수리 서비스를 받으실 수 있습니다.  
제품에 있는 일련번호가 명확히 알아 볼 수 없게 되거나 일련번호와 보증서에 등록된 정보가 상이하면 적절한 서비스 제공이 어려울 수 있습니다.  
(배터리는 보증에 포함 되지 않습니다.)
  2. 잘못된 전압 사용, 우발적 사고 등 사용자 부주의와 지정되지 않은 업체에 본 제품의 수리를 맡겨 이상이 발생할 경우엔 보증이 불가합니다.
  3. 정해진 품질보증 서비스 이외의 부가적인 서비스나 운송 서비스에 대해서는 비용이 발생할 수 있습니다.
  4. 사용자의 과실이나 부주의한 보관 등으로 발생한 문제, 비전문가의 제품 해체로 인한 문제, 보증서가 없거나 불가항력으로 발생한 고장에 대해서는 품질보증 서비스를 제공하지 않습니다.
  5. 품질보증 서비스 신청 시 제품보증서를 동봉해주시시오. 당사는 중고제품의 상품회수, 폐기된 제품에 대한 수거, 처리 및 재활용을 책임지고 있습니다.
  6. 가정용 외의 용도로(영업용 및 공중시설 등) 사용 시에는 보증이 불가합니다.
  7. 태풍, 지진, 수해 등 자연재해로 인한 고장 시에는 보증이 불가합니다.
- ※ 주의 : 서비스가 지속적으로 업그레이드 되기 때문에 세부 규정은 별도의 공지 없이 수정될 수 있음을 양해 바랍니다.