



주식회사 코리아브레오
주소: 서울시 강남구 선릉로 94길 (삼성동, 세종타워 14층)
전화: 1588-2336
팩스: 02-553-2567
우편번호: 135-877
웹사이트: 중국

iSee5 EYE RELAXER

USER MANUAL 사용자 설명서



2013.06.27 iSee5眼後按摩器中文說明書 210-147mm 鞍馬釘裝訂

사용법

작동

전원 켜기: 2초간 ON/OFF 버튼을 누르면 제품이 동작합니다.
모드 선택: 전원을 켜 후 ON/OFF 버튼을 짧게 누르면 SLEEP 모드, MED 모드, HARD 모드로 순서로 모드가 변경됩니다.
전원 끄기: ON/OFF 버튼을 길게 누르면 전원이 꺼집니다.



주의사항

사용자 주의사항을 유심히 읽고 안전하고 올바른 방법으로 제품을 사용하십시오.

1. 사용자 설명서의 내용을 자세히 읽은 후 안내되어 있는대로 사용하십시오.
2. 읊주 후이거나 물 상태가 좋지 않을 때, 운전 중에는 제품을 사용하지 않습니다.
3. 습한 곳, 온도가 높은 곳, 부식성 가스가 있는 곳에서 사용 및 보관, 충전하지 않습니다.
4. 본 제품을 전기 온열기구, 조리기구 근처에 두거나 직사광선에 두지 않습니다.
5. 뇌졸중, 혈압질환, 저혈당증이 있거나 녹내장, 백내장, 망막 분리 등 안구 질환이 있으면 본 제품을 사용하지 않습니다.
6. 7세이하 어린이와 거동이 불편한 환자 또는 신체적 / 정신적으로 장애가 있으면 본 제품을 사용할 수 없습니다.
7. 인공심장 박동기나 각종 전자 신체 보조기구 장치와 임산부는 제품을 사용하지 않습니다.
8. 제품 사용 시 콘택트렌즈나 안경을 빼고 사용하십시오.
9. 눈 수술(시력교정수술, 성형수술 등)을 받은 적이 있는 분께서는 절대 사용하지 않습니다.
10. 제품 사용 시 눈을 감고 사용하는 것을 권장하며, 제품 작동이 종료된 후에는 곧바로 눈을 뜨지 마시고, 몇 초간 눈을 감고 있다가 천천히 뜨십시오.
11. 본 제품은 의료 전문가의 진단과 치료를 대체하지 않습니다. 제품을 사용하기 전 제품을 사용해도 문제가 없는지 확인이 필요하다면 미리 상담의사와 논의 후 사용하십시오.
12. 본 제품을 사용하려는 부위에 발진, 염종 등의 이상이 있거나 해당 부위에 수술을 받은적이 있는 경우, 치료중인 경우에는 본 제품을 사용하지 않습니다.
13. 본 제품은 온열 기능을 가지고 있으므로 온도 변화에 민감한 사용자는 사용자 주의사항으로, (탈모, 아토피, 여드름, 알레르기 악화 추가)
14. 사용 중 제품이 이상히 있거나 불쾌감이 느껴질 경우 사용을 중단하고 전원을 차단한 후 점검하십시오.
15. 충전 어댑터는 제품과 함께 제공되는 안정화된 어댑터로만 사용하시고 전기 안전에 유의하십시오.
16. 제품을 착용하고 전원을 켜 제품 사용을 시작하십시오. 또한 제품 착용 후 갑자기 충전을 하지 않습니다.
17. 본 제품은 가정을 제품으로 개발되었으며 다른 상업적인 용도나 치료, 진단을 위해 사용하지 않습니다.
18. 제품 청소 시 실금 소독된 습윤 중성세제에 묻혀 닦아 냅니다. 제품을 절대 물로 씻지 않습니다.

문제해결

만약 제품을 사용하면서 문제가 있다면 아래에 있는 방법을 체크해 주십시오. 아래의 방법으로도 동작하지 않는다면 전원을 끄고 서비스 센터에 알려주세요. 절대 스스로 분해하거나 수리하지 마십시오.

문제점	예상원인 및 체크사항	해결방법
전원이 켜지지 않을 때	케이블 상태 양호 확인 배터리 충전량 부족	케이블 연결 상태를 체크해 주십시오. 전원을 충전해 주십시오.
공기압력 혹은 진동이 약해졌을 때	배터리 충전량 부족	전원을 충전해 주십시오.

제품 사양	
전압	DC5V 1A
소비전력	5W
사용환경	온도 : 5℃ ~ 40℃ / 습도 : ≤80% 기압 : 860hpa ~ 1060hpa
제품크기	(L)208mm x (W)76mm x (H)106mm
중량	318g

제품유지보수

보관 시 주의사항

보관기간이 3개월을 초과할 경우 제품 작동여부를 확인하고 전원을 30분 정도 켜두시기 바랍니다. 배터, 백이나 지붕 부근에 보관하지 마십시오. 좋은 환경 상태를 유지해 주시고 직사광선과 부식성 가스를 피해주시기 바랍니다.

운반 시 주의사항

이 제품은 간단한 내진성 디자인을 가지고 있어서 비행기, 기차, 차, 배로 운반이 가능합니다. 다만, 눈, 비, 충격을 피해주시고 항상 똑바른 방향으로 놓아주십시오.

전원공급장치 확인

전원공급장치를 확인하고 전원이 제품의 적격 범위를 초과하는 경우 제품을 켜지 않습니다. 제품의 눈 덮개 부분과 케이블을 주기적으로 체크하십시오. 만약 충전이 되었다면 제품을 사용하지 마시고 서비스 센터로 보내주세요.

유지보수

습기, 설치류 그리고 오염을 방지 할 수 있도록 하십시오. 제품을 청소하기 전에는 제품의 전원을 종료해 주십시오. 제품 사용 후 안전한 곳에 보관하십시오. 무거운 물건을 제품 위에 올려지지 않습니다. 절연이 있을 시 전문가 기술자에게 문의하십시오. 스스로 제품을 절대 분해하지 않습니다.

소모품 및 액세서리 구매안내

소모품 및 액세서리 구매는 가까운 매장이나 www.koreabreo.com에서 구매가 가능합니다. 소모품 및 액세서리 관련하여 문의가 있으시면 고객센터 (1588-2336)로 연락해 주십시오.

목차

제품소개 및 구성	2
제품기능구성	3
사용법	4
주의사항	6
문제해결	7
제품유지보수	8
제품보증안내	9
제품보증서	10

breo제품을 구매해주셔서 감사합니다.

사용하시기 전에 이 설명서를 잘 읽어주시고, 나중에 참조 할 수 있도록 잘 보관해 주십시오.



제품소개 및 구성

제품소개

iSee5는 스마트한 공기압, 진동과 온열 그리고 편안한 자기장 등을 통해 지치고 피로한 눈을 풀어줍니다. 고급스러운 디자인과 음악 기능이 있는 이 제품은 껴고 잠을 수 있게 설계 되었으며, 눈에 직접 닿는 부분은 부드러운 소재를 사용하여 편안한 착용감을 제공합니다.

제품구성

iSee5 RELAXER, 충전 어댑터, 사용자 설명서, 휴대용 보관케이스

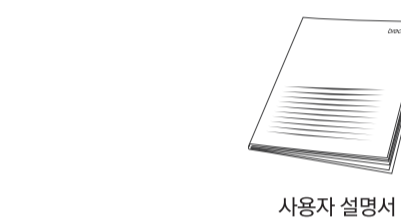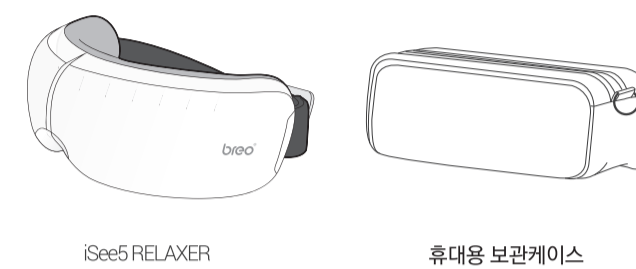

제품보증안내

보증서 안내

보증서를 이용하면 제품 유지보수 관련 서비스를 쉽게 제공 받으실 수 있습니다. 보증서 카드는 각 제품에 1개씩만 포함되어 있으며, 이를 분실하였을 때는 재발급이 어려우니 분실되지 않도록 보관에 유의하시기 바랍니다.

※ 품질보증 기간은 구매일로부터 1년간입니다.

보증조건

1. 구매일로부터 1년간 제품보증서로 수리 서비스를 받으실 수 있습니다. 제품에 있는 일련 번호가 정확히 알아볼 수 없게 되거나 일련 번호와 보증서에 등록된 정보와 상이하면 적절한 서비스 제공이 힘들 수 있습니다. 일련 번호는 충전 케이블 오른쪽에, (배터리는 보증에 포함되지 않습니다.)
2. 잘못된 전압 사용, 우발적 사고 등 사용자 부주의와 지정되지 않은 수리업체에 본 상품의 수리를 맡겨 이상이 발생할 경우 보상이 불가합니다.
3. 정해진 품질보증 서비스 이외의 부가적인 서비스나 운송 서비스에 대해서는 비용이 발생할 수 있습니다.
4. 사용자의 과실이나 부주의한 사용 등에서 발생한 성능 및 기능상의 하자로 중요한 수리가 필요한 경우 보증서나 구매일수증을 이용해 제품교환 또는 환불을 받을 수 있습니다.
5. 제품 사용 결함 외에 기타 요인으로 인해 상품이 손상되지 않았으며, 사용자 설명서 및 기타 부속부분과 함께 최초 구입 시에 포장 된 상태와 동일한 경우에만 상품 교환이나 환불, 수리를 받을 수 있습니다.
6. 위와 사항을 확인받고 하시거나 문의사항이 있으실 경우에는 구매처 혹은 고객센터 (1588-2336)로 연락해 주시면 신속하게 처리해드리겠습니다.
7. 태풍, 지진, 수해 등 자연재해로 인한 고장 시에는 보증이 불가합니다.

주의

· 서비스가 지속적으로 업그레이드 되기 때문에 세부 규정은 별도의 공지 없이 수정될 수 있음을 양해바랍니다.


고객 카드	
제 품 명 : iSee5 RELAXER	일련번호 : _____
구 입 일 자 :	구매지점 : _____
고 객 성 명 :	_____
연 락 처 :	_____
주 소 :	_____

※ 상기 내용은 동일한 고객 서비스를 제공하기 위해 활용됩니다.

제품기능구성

제품 기능 구성도

1. 전원 LED 표시등
2. ON/OFF 버튼
3. 상태 표시등
4. 상태 조절 버튼
5. 충전단자

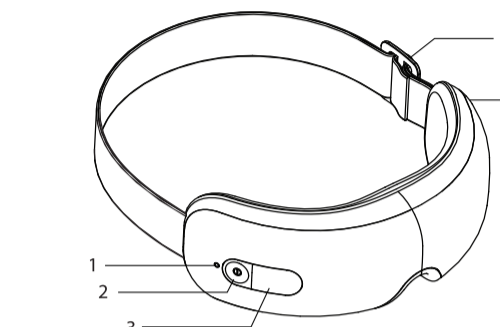

사용법

사용 전 준비사항

1. 배터리가 충분히 충전되었는지 확인 합니다.
2. 충전과 함께 제공되는 안정화된 충전 어댑터로 배터리를 충전해주시기 바랍니다.
3. 제품을 착용하고 전원을 켜 제품 사용을 시작하십시오. 이는 공기압력이 과해서 제품 내부에 에어백이 손상되는 것을 방지해줍니다.

충전

1. 아래 그림과 같이 iSee5 RELAXER의 충전단자 두껍을 엮는다.
2. 충전 어댑터의 DC 플러그를 제품의 충전단자에 연결해 주십시오.
3. 충전 중에는 상태 표시등에 충전량 표시 아이콘이 깜빡입니다.
4. 제품이 충전 되는 동안은 자동적으로 작동이 중지됩니다.
5. 충전 시간은 2 ~ 3시간입니다.

보증서 안내

보증서를 이용하면 제품 유지보수 관련 서비스를 쉽게 제공 받으실 수 있습니다. 보증서 카드는 각 제품에 1개씩만 포함되어 있으며, 이를 분실하였을 때는 재발급이 어려우니 분실되지 않도록 보관에 유의하시기 바랍니다.
※ 품질보증 기간은 구매일로부터 1년간입니다.

보증조건

1. 구매일로부터 1년간 제품보증서로 수리 서비스를 받으실 수 있습니다. 제품에 있는 일련 번호가 정확히 알아볼 수 없게 되거나 일련 번호와 보증서에 등록된 정보와 상이하면 적절한 서비스 제공이 힘들 수 있습니다. 일련 번호는 충전 케이블 오른쪽에, (배터리는 보증에 포함되지 않습니다.)
2. 잘못된 전압 사용, 우발적 사고 등 사용자 부주의와 지정되지 않은 수리업체에 본 상품의 수리를 맡겨 이상이 발생할 경우 보상이 불가합니다.
3. 정해진 품질보증 서비스 이외의 부가적인 서비스나 운송 서비스에 대해서는 비용이 발생할 수 있습니다.
4. 사용자의 과실이나 부주의한 사용 등에서 발생한 문제, 비 전문가의 제품 해체로 인한 문제, 보증서가 없거나 불가행력으로 발생한 고장에 대해서는 품질보증 서비스를 제공하지 않습니다.
5. 품질보증 서비스 신청 시 제품보증서를 동봉해주시고, 저희 회사는 중고제품의 상품화수, 폐기된 제품에 대한 수거, 처리 및 재활용을 책임지고 있습니다.
6. 가정용 외의 용도로(영업용 및 공중시설 등) 사용시에는 보증이 불가합니다.
7. 태풍, 지진, 수해 등 자연재해로 인한 고장 시에는 보증이 불가합니다.

주의 : 서비스가 지속적으로 업그레이드 되기 때문에 세부 규정은 별도의 공지 없이 수정될 수 있음을 양해바랍니다.

고객 카드	
제 품 명 : iSee5 RELAXER	일련번호 : _____
구 입 일 자 :	구매지점 : _____
고 객 성 명 :	_____
연 락 처 :	_____
주 소 :	_____

※ 상기 내용은 동일한 고객 서비스를 제공하기 위해 활용됩니다.