

사용자 설명서

mini103 RELAXER

CE RoHS  

브레오 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 제품 사용 전 설명서 내용을 충분히 숙지하시고 필요 시 찾아볼 수 있도록 잘 보관하십시오.

제품 소개, 사용 대상과 범위

제품소개

mini103 Relaxer는 눈 주위와 얼굴 피부에 사용하기 가능합니다. 본 제품은 눈 주위 및 얼굴 피부를 마사지 하여 피부의 생기를 더하는데 도움을 줍니다. 휴대성이 용이하며, 고급스러운 디자인의 본 제품은 언제 어디서든 편안하게 사용이 가능합니다.

사용 범위

1. 눈 주위 또는 얼굴
2. 눈가 주름 부위나 눈 밑


제품 구성

mini103 Relaxer, 사용자 설명서, 보충제, 간진지(AA size 1개입)



각 부 명칭

1. 본체
2. 기능 표시 바늘
3. 간진지 덮개

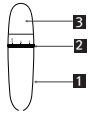

사용 전

1. 제품에 이상이 없는지 확인해 주십시오.
2. 본체에 파손 부위가 없는지 확인해 주십시오.
3. 간진지가 용량이 충분한지 확인해 주십시오.

조작

간진지삽입

1. 본체를 좌살표 방향을 따라 돌립니다.
2. 기능 표시 바늘을 "open"에 맞춰주십시오.
※ 간진지의 (+)극과 (-)극이 올바르게 확인하십시오.
3. 간진지 덮개 분리 후 간진지를 끼워주십시오.
4. 본체를 돌려 기능 표시 바늘이 "off"에 맞춰지게 해주십시오.



사진 1

사진 2

제품 사용 예시



작동

전원 켜기
기능 표시 바늘이 "on"에 맞춰지도록 본체를 돌려 주십시오.



전원 끄기
기능 표시 바늘이 "off"에 맞춰지도록 본체를 돌려 주십시오.



주의사항

사용자 주의사항을 유심히 읽고 안전하고 올바른 방법으로 제품을 사용하십시오.

1. 사용자 설명서의 내용을 자세히 읽은 후 안내되어 있는대로 사용하십시오.
2. 간진지 덮개와 본체가 잠긴 상태에서는 무리하게 본체를 시도하지 마십시오. 수리할 수 없는 손상이 발생할 수 있습니다.
3. 제품에는 플라스틱 필름으로 포장된 간진지 1개가 포함되어 있습니다. 플라스틱 필름을 제거하신 후 사용하십시오.
4. 음주 후이거나 물 상태가 좋지 않을 때, 운전 중에는 제품을 사용하지 마십시오.
5. 습한 곳, 온도가 높은 곳, 부식성 가스가 있는 곳에서 사용 및 보관하지 마십시오.
6. 제품을 전기 콘센트, 충전기구 근처에 두거나 직사광선에 두지 마십시오.
7. 뇌졸중이나 혈압 질환, 저포도당증이 있으신 분은 본 제품을 사용하지 마십시오.
8. 7세이하 어린이와 거동이 불편한 환자 또는 신체적 장난적으로 장래가 있으신 분은 본 제품을 사용할 수 없습니다.
9. 인공심장 박동기나 각종 전자 신체 보조기구 장착자와 합선되는 본 제품을 사용하지 마십시오.
10. 제품을 사용하는 부위에 발진, 경증 등의 이상이 있거나 해당 부위에 수술을 받으신 경우, 치료중인 경우에는 본 제품을 사용하지 마십시오.
11. 본 제품은 의료 전문가의 진단과 치료를 대체하지 않습니다. 사용 전 제품을 사용해도 문제가 없을지 확인이 필요하다면 꼭 담당 의사와 논의하십시오.
12. 사용 중 제품에 이상이 있거나 불쾌감이 느껴질 경우 사용을 중단하시고 전원을 차단한 후 점검해 주십시오.
13. 장시간 사용하지 않을 경우 간진지 용량이 새어 나와 제품이 손상되는 것을 피하기 위해 간진지를 분리해 주십시오.
14. 간진지 덮개 연결부위의 방수 실리콘링을 분해하지 마십시오. 제품의 방수 기능이 손상될 수 있습니다.
15. 본 제품은 가용용 제품으로 개발되었으므로 다른 상업적인 용도나 치료, 진단을 위해 사용하지 마십시오.
16. 제품 청소 시 살균 소독된 물을 증정제에 묻혀 닦아냅니다. 제품을 절대 끓로 씻지 마십시오.

문제해결

기기를 사용하시면서 문제가 발생할 경우 아래 지시를 따르면 됩니다. 문제가 해결되지 않고 기기가 정상적으로 작동하지 않는 경우, 전원을 끄고 서비스 센터에 문의하십시오.

임의로 기기를 분해하거나 수리하지 마십시오.

증상	가능원인	해결책
전원이 들어오지 않을때	간진지 용량 부족	간진지를 교체하십시오.
	간진지 전극 문체	간진지의 전극이 맞게 삽입됐는지 확인하십시오. 간진지가 제대로 삽입되어 있고 고정되어 있는지 확인하십시오.
기능 표시 바늘이 "on"에 있지 않을때	기능 표시 바늘이 "on"에 있지 않음	기능 표시 바늘을 "on"에 위치시킵니다.
	간진지 용량 부족	간진지를 교체하십시오. 간진지가 올바르게 삽입되어 있고 고정되어 있는지 확인하십시오.

기술사항

작동환경	온도: 5 °c~40 °c
	상대습도: ≤80%
크기	기압: 860hpa - 1060hpa
	(L) 30mm x (H) 124mm
중량	62g
소비전력	0.6W

보관

1. 보관기간이 6개월을 초과할 경우 제품 작동부위를 확인하십시오.
2. 바닥, 벽 또는 천장과 가깝게 보관하지 마십시오.
3. 직사광선과 부식성 가스를 피해 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

운반

본 제품은 기초적인 내진 설계가 적용됐습니다. 항공, 철도, 고속도로나 선박을 통해 운반할 수 있습니다. 눈, 비, 충격을 피하시고 제품이 뒤집히지 않도록 주의하십시오.

유지관리 및 제품 보장

유지관리

1. 습기와 오염을 피해 보관하십시오.
2. 제품 사용 후 안전한 곳에 보관하십시오.
3. 직사광선과 부식성 가스를 피해서 보관하십시오.
4. 결함이 있을 시 절대 스스로 제품을 분해하지 마시고 전문 기술자에게 문의하십시오.
5. 제품을 청소하기 전에는 전원을 꺼주십시오.

제품교환 / 환불 안내

1. 구매일로부터 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자로 중요한 수리가 필요한 경우 보충제나 구매명수증을 이용해 제품 교환 또는 환불을 받으실 수 있습니다.
2. 당일 구입일로부터 1개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자로 중요한 수리가 필요하다면 상품 교환이나 수리를 할 수 있습니다.

단, 제품 사용 결함 외에 기타 요인으로 인해 상품이 손상되지 않았어야 하며, 사용자 설명서 및 기타 부속부품과 함께 최초 구입 시에 포장 된 상태와 동일한 경우에만 상품 교환이나 환불 또는 수리를 받으실 수 있습니다.

위의 사항을 처리받으고 하시거나 문의사항이 있으신 경우에는 구매처 혹은 고객센터(1588-2336)로 연락해 주시면 신속하게 처리드리겠습니다.

보충 방법

구매일로부터 1년간 제품보충제로 무상 수리서비스를 받으실 수 있습니다. 제품에 있는 일련 번호가 명확히 알아보기 수 없게 되거나 일련 번호와 보충제에 등록된 정보와 상이하면 적절한 서비스 제공이 힘들 수 있습니다. 일련 번호는 배터리 분리 후 내부확인가능.

코리아브레오 A/S 센터
T. 1588-2336